



Health  
**cibX**

**mobi**

**Gebruiksaanwijzing**






## Inhoudsopgave

<b>Belangrijke veiligheidsinstructies en richtlijnen</b> .....	3
<b>Productbeschrijving &amp; leveringsomvang</b> .....	4
<b>Toepassing</b> .....	5
<b>Installatie</b> .....	5
<b>Ontgrendelen</b> .....	6
<b>Gebruiksaanwijzing</b> .....	7
Zet aan / uit.....	7
Slaapmodus.....	7
Opladen batterij.....	8
Betekenis van de LED-kleur tijdens het opladen.....	8
<b>Functies</b> .....	9
Lokalisatie.....	9
Alarm.....	9
Geofence.....	10
<b>Het cibX-portaal</b> .....	10
Inloggen.....	10
Startpagina.....	11
Instellingen.....	11
Apparaten.....	12
Info.....	12
kaart.....	13
contacten.....	13
berichten.....	14
Geofence.....	15
Verschuiven.....	16
Adres zoeken.....	16
Afmelden.....	16


<b>Gebruiksduur en verwijdering</b> .....	17
<b>Wettelijke basis</b> .....	17
<b>Wettelijke bepalingen</b> .....	18
<b>Gegevensbescherming &amp; gegevensopslag</b> .....	19
<b>Opmerkingen over mobiele communicatie</b> .....	20
Mobiel netwerk.....	20
Contractuele verplichting.....	20
Verlenging van functies.....	20
Toepassingsgebied.....	21
<b>Notities</b> .....	22
<b>Uw belangrijkste informatie in één oogopslag</b> .....	24

Bedankt voor het kiezen van de mobi! Om een correct gebruik van het product en een probleemloze werking te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik



## Belangrijke veiligheidsinstructies en richtlijnen

	Bewaar de <b>mobi</b> nooit in de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, kachels of in de auto op het schap! De <b>mobi</b> Gelieve niet langdurig bloot te stellen aan direct zonlicht! Sterke zon of hitte kan het plastic permanent beschadigen
	de <b>mobi</b> is spatwaterdicht, niet waterdicht.
	Maak de schoon <b>mobi</b> , indien nodig, schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Als desinfectie nodig is, zorg dan voor een geschikt desinfectiemiddel. Neem hiervoor bij het gebruik de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel in acht!
	Bescherm de <b>mobi</b> van sterke trillingen
	Een kapotte en oude <b>mobi</b> moeten apart worden afgevoerd! Vraag uw regionale afvalverwerkingsbedrijf of specialzaak waar en hoe u dit kunt doen.

## Productbeschrijving & leveringsomvang

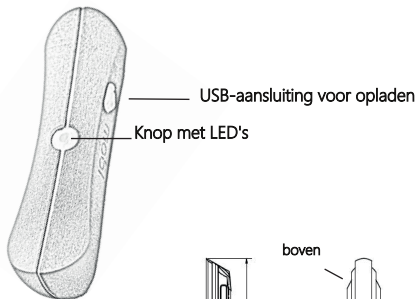


steunrail (achterkant)

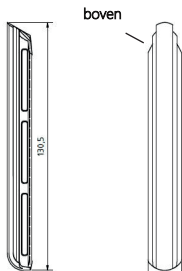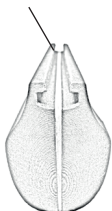

montagerail



2 klitbandriemen

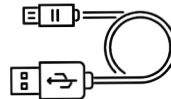

USB-oplaadkabel

### Technische details

Dimensies	136 mm x 38 mm x 44 mm
Geïntegreerde elektronica	GSM-modem, GPS-antenne Simkaart (telecom)
baterij type	Lithium batterij
Nominale spanning van de batterij:	3.7V
laad tijd	2 - 18 uur, afhankelijk van USB-oplader
garantie	2 jaar
baterij capaciteit	2600mAh
batterijduur	ongeveer 14 dagen met permanent gebruik in tracking

## Toepassing


De toepassingsgebieden van mobi zijn vooral gericht op het lokaliseren van mensen die mobiliteitshulp nodig hebben. De geïntegreerde lokaliserings- en alarmmodule is speciaal afgestemd op mensen met dementie en/of desoriëntatie. mobi kan worden bevestigd aan rollators, rolstoelen, scooters of andere alledaagse hulpmiddelen. Zorg ervoor dat u voor gebruik de mobi goed bevestigd aan uw dagelijkse hulpmiddel



Figuur 1

## installatie

Bevestig de meegeleverde bevestigingsrail aan uw loophulpmiddel met de meegeleverde klittenband (Fig. 1) (Voor TOPRO rollators kunt u de mobi bevestigen aan de TOPRO-accessoireneus) U kunt overtollig klittenband afsnijden. Plaats nu de mobi van bovenaf op de rail (Fig. 2)

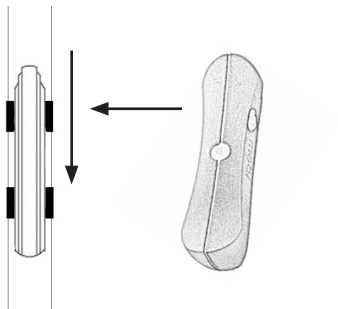

Figuur 2

## Ontgrendelen

Om alle functies onbeperkt te kunnen gebruiken, is voldoende mobiel bereik vereist. Met het netwerk van Deutsche Telekom AG heeft u de beste dekking in Duitsland en Europa zonder extra kosten (bijv. roamingkosten). Voordat u uw mobi voor de eerste keer gebruiken kan, moet deze worden ontgrendeld

Gebruik: - Hotline: +49 (0) 25 71 - 139 55 55 (ma - do 9.00 - 16.00 uur en vr 9.00 - 12.00 uur)  
- Online formulier op onze website <https://www.cibx.de/online-freischalt-2/>

Voor activering heb je nodig:

- IMEI-nummer (te vinden op de achterkant van de gebruikershandleiding of op uw apparaat)
- Activatie code
- een geldig e-mailadres

U vindt het IMEI-nummer en de activeringscode op uw apparaat of op de laatste pagina van uw gebruikershandleiding. Na succesvolle activering ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

**BELANGRIJK:** Het wachtwoord moet de eerste keer dat u inlogt worden gewijzigd!


U krijgt toegang tot de portal via de knop "LOGIN PORTAL" rechtsboven op onze website [www.cibx.de](http://www.cibx.de), via onze gratis APP "cibx-SMARTSTICK" (Google Play Store voor Android-telefoons) of rechtstreeks via het webadres: <https://cibx.ram.m2m.telekom.com/apps/smartstick/index.html#/>

De looptijd van je simkaart is 1 jaar. Deze wordt niet automatisch verlengd!  
Als je de simkaart wilt verlengen, neem dan contact met ons op.

# Gebruiksaanwijzing

## Zet aan / uit

Om het apparaat in te schakelen, houdt u de knop op het oppervlak van de mobi één seconde ingedrukt. De geïntegreerde LED licht blauw op als de activering succesvol is (actieve status) en maakt automatisch verbinding met het **cibX**-portaal (Blijf bij het eerste gebruik ongeveer 15 minuten buiten!) Om uit te schakelen drukt u twee keer kort op de knop. De LED blinkt twee keer rood als de deactivering is gelukt en de mobi sluit af.

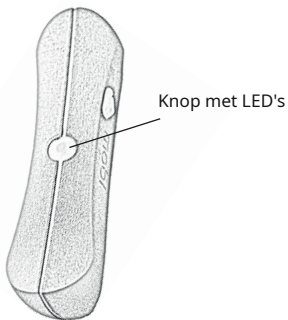

## Slaapstand

Wordt een gemonteerde mobi ca. 5 minuten niet bewogen, schakelt het over naar de slaapmodus om energie te besparen.

**Belangrijk:** In deze toestand worden er geen posities meer verzonden. Heractivering vindt automatisch plaats als er opnieuw beweging optreedt. In dit geval licht de geïntegreerde LED weer blauw op.


## Opmerking

Laat dat mobi, indien mogelijk, gemonteerd en haal het er niet af. Liggend is de mobi altijd actief en verbruikt constant stroom. De batterij loopt leeg na ongeveer 4 dagen ononderbroken gebruik. Als het apparaat regelmatig overschakelt naar de slaapstand, neemt de levensduur van de batterij toe (afhankelijk van het gebruik kan de ingebouwde batterij tot 14 dagen meegaan).

## Opladen batterij

De batterij bij levering van uw mobi 80% opgeladen Als het batterijvermogen daalt tot ongeveer 20%, stuurt de portal een waarschuwingsbericht.

Tegelijkertijd begint de LED continu rood te branden. Om op te laden, sluit u de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer of op een voedingsadapter voor het stopcontact. U vindt de USB-aansluiting aan de zijkant van de mobi.

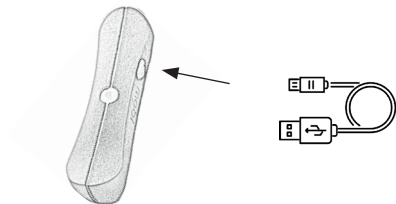


## Betekenis van de LED-kleur tijdens het opladen

Afhankelijk van het actuele laadniveau ontstaan bij het laden de volgende LED-patronen:

LED's knippert rood	Batterij volledig ontladen
LED knippert afwisselend rood/groen	Batterij bijna leeg (<20%)
LED's knippert groen	Batterij bijna opgeladen
LED's brandt ononderbroken groen	BATTERIJ is compleet geladen (100%)




## lokalisatie

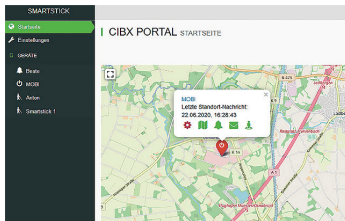


In de actieve modus, actualiseert de mobi om de 15 minuten zijn locatie via GPS. De positiebepaling is tot op 10 meter nauwkeurig. Voorwaarden hiervoor zijn een adequate mobiele telefoonverbinding, vrij zicht op de lucht en buiten een gebouw zijn. In gebouwen, vanwege de beperkte GPS-ontvangst, is er alleen een onnauwkeurige of helemaal geen positionering mogelijk. Voor de eerste positiebepaling, gelieve de mobi minimaal 15 minuten in de open lucht houden.

## alarmering

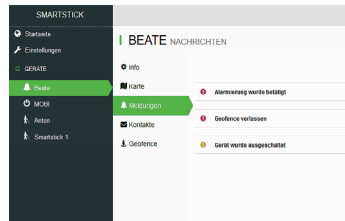

In noodsituaties, zoals een val of desoriëntatie, kan via mobi direct een alarm worden verzonden. Houd hiervoor de knop minimaal 5 seconden ingedrukt totdat u een piep hoort. Tegelijkertijd begint de LED 10 seconden snel rood te knipperen. De hulpoproep wordt per e-mail verzonden naar de contactpersonen die zijn opgeslagen in het portaal. Daarnaast worden contactpersonen met de App op de hoogte gebracht via een pushmelding. Let op: Er zijn geen extra kosten voor het activeren van het alarm! Als het alarm wordt geactiveerd, kan het niet later worden uitgeschakeld.

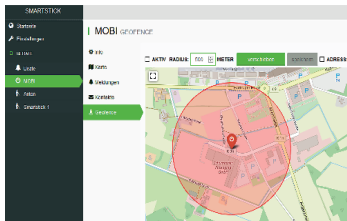

Met de Geofence-functie wordt een gebied gedefinieerd waarin de persoon met mobi zich vrij bewegen mag. Als deze "beschermingszone" wordt verlaten, dwz als de gespecificeerde grens wordt overschreden, worden de opgeslagen contactpersonen automatisch gewaarschuwd via e-mail of pushmelding op hun mobiele telefoon. De minimale geofence-instelling is een straal van 500 meter. De bovengrens kan naar wens worden ingesteld.

## Het cibX-portaal

Aan elke mobi is een portaal (een app met gelijke dekking (xcibX - Smartstick Android)), die de verkregen gegevens visualiseert en de laatste gelokaliseerde locatie op een kaart van het gebied weergeeft.

Log in


Portaal openen (zie ook activering). Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (hoofdlettergevoelig!)

The screenshot shows the login page for the 'cibX Health Central Information Board'. It features the logo at the top, followed by two input fields: 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord'. There is a checkbox for 'Wachtwoord merken' and a 'Inloggen' button. A link for 'Wachtwoord vergeten?' is located at the bottom right.

### Opmerking:

Na de eerste aanmelding wordt u automatisch gevraagd om het wachtwoord, dat u in eerste instantie hebt toegewezen gekregen, te wijzigen! Volg deze instructie. Na de wijziging moet u opnieuw inloggen op de portaal om de registratie te voltooien.

## Startpagina

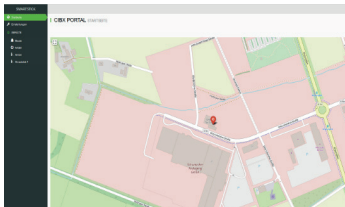


Na succesvolle registratie wordt de startpagina geopend. Hier kunt u de locatie van de mobi bekijken en een kort overzicht opvragen door op het positiesymbool te klikken. Het korte overzicht omvat:

de naam van het apparaat; het laatste locatiebericht met datum en tijd; de verschillende modules voor directe selectie.

Voor het in- of uitzoomen zijn de "+/-"-symbolen beschikbaar in de rechterbovenhoek van het van kaartgedeelte,

Met een klik op de knop "*finden*" zie je alle apparaten die je hebt geregistreerd (mobi/SMARTSTICK) in een overzicht. Bij vragen of onduidelijkheden, klik dan op het vraagteken rechtsboven op de pagina.

## ideeën

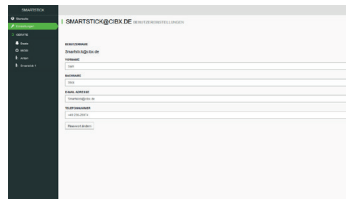

Onder "*Einstellungen*" kunt u de volgende gegevens instellen:


- **Gebruikersnaam**(E-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd)
- **Voornaam** van de eigenaar
- **Achternaam** van de eigenaar
- **E-mailadres** van de eigenaar
- **Telefoon nummer** van de eigenaar

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u op de knop "*Passwort ändern*"

Voer uw nieuwe gewenste wachtwoord in, bevestig en sla het op.

Let op de informatie in de kop over de toegestane tekens en lengte van het wachtwoord

## apparatuur

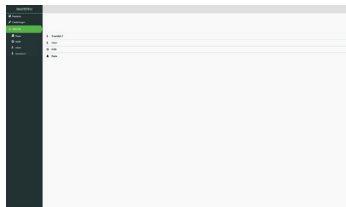

Onder het menu-item *apparatuur* vindt u alle mobi/ SMARTSTICK die voor deze gebruiker zijn geregistreerd. Zodra u een apparaat heeft geselecteerd door erop te klikken, wordt de informatiepagina *Apparatuur* geopend.

Via de infopagina *apparatuur* kunt de volgende informatie bewerken en bekijken:


**Algemene informatie**

**Karte (kaart)**


**Meldungen (meldingen)**

**Kontake (contacten)**

**Geofence (geofence)**

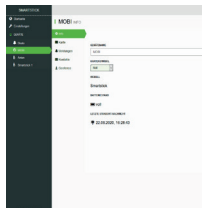

## info

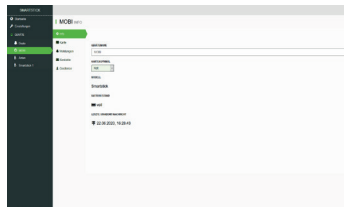

Hier kunt u de volgende informatie aanpassen en bekijken:

**Toestelnaam:** Over deze naam kunt u een apparaat in het systeem vinden.

**Kaartsymbool:** Weergeven in verschillende kleuren is vooral handig als er meerdere apparaten zijn.


**Model:** mobi/ SMARTSTICK

**Batterijniveau:** het huidige batterijniveau van de apparaat wordt weergegeven

**Einde contract simkaart:** geeft aan wanneer uw contract voor de simkaart verloopt en dus zonder verlenging niet meer uitzendt.


**Laatste locatiebericht:** toont de laatste positie van het apparaat

## kaart

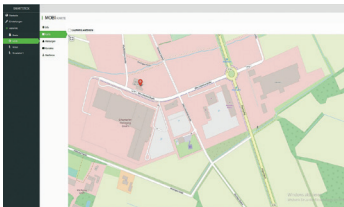

De kaartmodule toont u de exacte locatie van de geselecteerde mobi. Bovendien kan, onder het menu-item "Laufweg anzeigen" een geschiedenis van bewegingen kan worden opgevraagd. Selecteer de gewenste periode en de afgelegde route wordt weergegeven.

## contacten

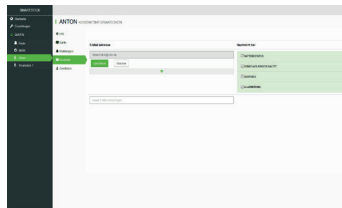


Onder het menu-item "E-mailadres" kunt u de contactpersonen opslaan die, indien nodig, moeten worden geïnformeerd. U kunt zoveel contacten toevoegen als u wilt. Als u op het e-mailadres van de contactpersoon klikt, verschijnt een ander veld. Hier kunt u aangeven welke berichten de contactpersoon moet ontvangen (in de app kunt u ook aangeven of u deze als pushberichten wilt ontvangen)

Berichten kunnen worden verzonden voor de volgende berichten:

- Batterij status, (Batteriestatus)**
- Apparaat aan/uit, (Gerät aus/eingeschaltet)**
- geofence (Geofence)**
- alarmering (Alarmierung)**

## berichten

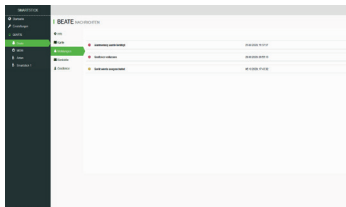

De actuele statusmeldingen worden hier als overzicht weergegeven  
Deze berichten zijn mogelijk en worden weergegeven in deze volgorde:

- Alarm is bevestigd
- Geofence verlaten / geofence betreden
- Apparaat was uitgeschakeld / apparaat was ingeschakeld

De intensiteit van het bericht is gemarkeerd in kleur

rood	kritisch
Oranje	waarschuwing vooraf
blauw	niet kritisch


Een recenter bericht vervangt het oudere bericht  
Bijvoorbeeld het bericht:

„Alarmiering wurde betätigt vor 10 min“  
vervangen door het bericht:  
„Alarmiering wurde betätigt vor 3 min“.

Als alternatief kunt u ook zelf berichten van de portaal verwijderen  
Klik hiervoor op het gewenste bericht en druk vervolgens op de knop "Löschen"

Waarschuwingen die worden genegeerd door nieuwe activiteit (zoals "geofence exit/ Geofence verlaten" door "re-enter geofence/ Geofence wieder betreten") worden automatisch gewist

## geofence

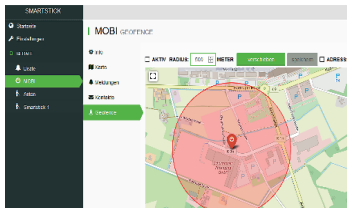

Met de geofence-functie definiert u digitaal een gebied in de vorm van een cirkel waarin het apparaat vrij kan bewegen. Als de cirkel wordt verlaten, wordt automatisch een alarm geactiveerd en wordt er een bericht verzonden naar de opgeslagen contactpersonen.

Om geofencing in te stellen, zijn de volgende opties beschikbaar boven de kaart:

- Actief / inactief (Aktiv/Inaktiv)**
- straal (Radius)**
- Verplaatsen (Verschieben)**
- adres zoeken (Adresssuche)**

## Actief / inactief

- Actief:**
- Er wordt een vinkje weergegeven in het selectievenster
  - De straal waarin het apparaat mag staan wordt groen weergegeven
  - Je krijgt een bericht zodra het toestel de straal verlaat

## Inactief:

- Er wordt een vinkje weergegeven in het selectievenster
- De straal waarin het apparaat mag staan wordt in rood weergegeven
- U ontvangt geen bericht zodra het apparaat de straal verlaat

## straal

Hier stelt u de bewegingsradius in (bijv. 1.000 m). Houd er rekening mee dat de ondergrens 500 meter is. De bovengrens kan naar wens worden ingesteld.

## Verplaatsen

Als je van locatie verandert, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen, vakantie, etc., is het zinvol om de bewegingsstraal aan te passen aan de nieuwe omgeving. "*Verschieben*" en volg dan de instructies in de kop.

Als het geselecteerde gebied overeenkomt met uw ideeën, klikt u eenmaal op de kaart om het middelpunt van de cirkel in te stellen. Sla vervolgens uw wijzigingen op met de knop "*Speichern*" op computer

### Tip:

Omdat de geofence een extra beveiligingsmaatregel is, adviseren wij om de geofence altijd om de huidige locatie van de te wikkelen mobi liggen

## adres zoeken

Voer hier uw nieuwe gewenste adres in en druk vervolgens op de knop "*Enter*" op uw toetsenbord / smartphone De kaart toont u het geselecteerde gebied

## Afmelden



Om uit te loggen uit de portal, klikt u op uw gebruikersaccount in de rechterbovenhoek en selecteert u de knop "*Ausloggen*" uit

Naar succesvol afmelden verschijnt de Registratiemasker voor een eventuele nieuwe registratie



## Duur van gebruik en verwijdering

Wij nemen de aansprakelijkheid, conform de Productaansprakelijkheidswet, alleen voor het voor het eerst op de markt brengen van onze producten. We gaan alleen akkoord met hergebruik als de mobi eerder door ons is gecontroleerd. De garantie voor mobi is 2 jaar. Na deze periode is verder gebruik van de mobi de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Kapotte en oude mobi kunnen **niet** bij het huisvuil worden weggegooid, maar moeten apart worden afgevoerd!

Vraag uw regionale afvalverwerkingsbedrijf of speciaalzaak waar en hoe u dit kunt doen.

## Legale basis

### Garantie en aansprakelijkheid

U heeft een kwalitatief hoogwaardig cibX-product gekocht. Indien, ondanks de hoogste kwaliteitsnormen in onze productie, een gerechtvaardigd materiaaldefect optreedt, heeft cibX het recht, binnen het kader van een garantie van 24 maanden, het defecte artikel te repareren of te vervangen. Voor schade, die is ontstaan als gevolg van wijzigingen aan onze producten, zijn wij niet aansprakelijk. Slijtagedelen zijn uitgesloten van garantie mobi. Als het een op maat gemaakt product is, kan het na activering niet worden geruild.

### gegevensverzameling

de mobi verzamelt zijn gegevens via GPS. Deze procedure vormt geen privacy belemmering, maar maakt het mogelijk om te bepalen waar de betrokkene zich momenteel bevindt. Zelfs de functie van het alarm als technische maatregel is geen privacy schending, maar is slechts een waarschuwingsapparaat dat elektronisch alarm slaat als de mobi het gedefinieerde bewegingsbereik verlaat.

## Wettelijke bepalingen

In principe kunnen technische middelen worden gebruikt voor persoonlijk toezicht, maar het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is verboden totdat de betrokkene zijn toestemming geeft of de wet of een andere wettelijke regeling dit toestaat of beveelt (BDSG §4) De toestemming is alleen effectief als het is gebaseerd op de vrije beslissing van de betrokkene en schriftelijk is. Als de toestemming schriftelijk moet worden gegeven samen met andere verklaringen (bijv. levenstestament), moet dit met name worden benadrukt (BDSG §4a). Wij adviseren zorginstellingen en ziekenhuizen om de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens te integreren in het testament. Als de getroffen persoon lijdt aan het dementiesyndroom en niet meer in staat is om zelfstandig te kunnen ondernemen is de toestemming van de leidinggevende noodzakelijk! In de privésfeer is een mondelinge afspraak tussen betrokkene en de personen die hij vertrouwt voldoende, maar wij raden ook aan om dit schriftelijk vast te leggen. Mobiel via GPS wordt openlijk gecommuniceerd door middel van informatie op de verkoopdoos, de gebruiksaanwijzing en in het verkooppraatje. De koper gaat akkoord met de aankoop van een mobiel. Indien de koper niet tegelijkertijd gebruiker is gelden bovenstaande voorwaarden. Bewegingsgegevens, statusmeldingen (bijv. alarmmeldingen) en beperkte persoonsgegevens worden verzameld.

## recht op het verstrekken van informatie

De eigenaar en de koper hebben het recht om op elk moment informatie over hun opgeslagen gegevens te ontvangen (BDSG §34). Bovendien kunnen ze aandringen op het wissen van bepaalde gegevens (BDSG §35). Er vindt een automatische verwijdering van de verzamelde transactiegegevens plaats, zoals hierboven vermeld, automatisch na 3 maanden. De toegewezen toegangsgegevens worden alleen door de eigenaar zelf doorgegeven. cibX GmbH en Deutsche Telekom AG mogen de gegevens niet aan derden doorgeven zonder toestemming van de eigenaar.

## Privacy en gegevensopslag

De verzamelde bewegingsgegevens worden strikt gepseudonimiseerd en uitsluitend opgeslagen in de datacenters van Deutsche Telekom AG in overeenstemming met de hoogste Duitse gegevensbeschermingsnormen. De gegevens worden altijd parallel opgeslagen om een ononderbroken toegang door de andere gegevens te kunnen garanderen. In het geval van een storing van één datacenter, worden ook gegevens opgeslagen bij cibX GmbH. Alleen de gebruiker van de aangesloten portal heeft toegang tot en inzicht in de gegevens! Het IMEI-nummer en een activeringscode zijn nodig om de simkaart te activeren, deze kan alleen worden geactiveerd na aankoop van een simkaart. Mobiel zijn toegankelijk. Na succesvolle telefonische of digitale activering ontvangt de beller zijn toeganggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het cibX-portaal per e-mail. De verbinding met het portaal is SSL-beveiligd. Wanneer u voor de eerste keer inlogt, wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. De verzamelde bewegingsgegevens worden na 3 maanden automatisch en onherroepelijk verwijderd!

## Opmerkingen over mobiele communicatie

### **mobiel netwerk**

in de mobi een simkaart van Deutsche Telekom AG is geïnstalleerd

### **contractuele verplichting**

De aankoopprijs is inclusief gebruik van de simkaart voor 1 jaar

Er wordt geen abonnement afgesloten. Neem contact op met cibX GmbH om het contract te verlengen

### **Verlenging functies**

Alle functies van mobi (Alarmering, lokalisatie en geofence) zijn gekoppeld aan het mobiele netwerk. Om deze na een jaar te kunnen blijven gebruiken is een tijdige verlenging noodzakelijk

Het cibX-serviceteam zal ongeveer 4 maanden voor het einde proactief contact opnemen met de gebruiker(s) die zijn opgeslagen in de portal

Als er geen verlenging gewenst is, blijft mobi eigendom van de koper

## Toepassingsgebied:

Naast Duitsland zijn de functies van de mobi kan ook zonder beperkingen worden gebruikt binnen landengroep 1 van Deutsche Telekom AG

Dit omvat de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Guadeloupe, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen , Luxemburg , Malta, Martinique, Mayotte, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Réunion, Roemenië, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (Frans deel), San Marino, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Vaticaanstad, Cyprus

Buiten deze landen wordt de mobiele dataverzameling automatisch beëindigd Gebruik van de locatiefunctie (GPS via GSM) is niet meer mogelijk

van de bovenstaande landen wordt automatisch opnieuw geactiveerd mobielschakel het a.u.b. kort in zodat de mobiel kan een eerste verbinding met het telefoonnetwerk tot stand brengen Na succesvolle registratie in het netwerk van landengroep 1, de functies van demobiel weer volledig bruikbaar





## Uw belangrijkste informatie in één oogopslag

IMEI:

Gebruikersnaam: \_\_\_\_\_

Wachtwoord\*: \_\_\_\_\_

\* Wijzig het standaardwachtwoord in een persoonlijk wachtwoord  
wanneer u voor de eerste keer inlogt!

**Heeft u vragen of hulp  
nodig?**

Bel ons, we zijn er om te  
helpen!

**Telefoon: 02571-1395555**

**support@cibx.de**

**CE RoHS**



**cibX GmbH**  
Weitkampweg 87, 48161 Münster  
Germany  
info@cibx.de  
www.cibx.de

Niederlassung

AirportparkWest  
Otto-Lilienthal-Str. 20, 48268 Greven  
Germany

**cibX** Health